


如何进行测试？

如果信件内容让您使用 2 个标签 (étiquette) 进行测试，那么请从步骤 1 和步骤 2 开始做起，然后继续步骤 3。如果您没有信件，则直接从下面的 1bis 步骤开始。



1 将大一些的那个标签贴到身份识别卡 (fiche d'identification) 上。身份识别卡就位于表单的中间联内。贴好后还需填写识别卡上的信息。

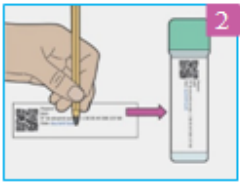


2 在小一些的标签上标明进行测试的日期。将标签贴到试管平坦的一面，对应位置标有“姓名”和“日期”字样。

字样。



1bis 仔细填写好身份识别卡及其标签，它们都位于表单的中间联内。

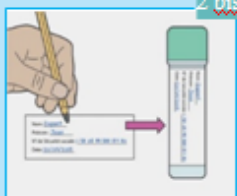

2bis 将标签贴到试管平坦的一面，对应位置标有“姓名”和“日期”字样。然后继续步骤 3。



3 使用自粘胶 (autocollant) 将粪便采集纸固定在马桶圈中间。轻轻地按压纸张，以便形成一个小坑形状。


重要提示：为了确保测试成功，粪便不得接触任何液体物质（包括尿液、消毒液等）。




4 旋转瓶盖打开试管。



5 使用棉签刮取粪便表面，需从多个不同分布点进行采集。

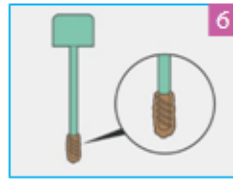


6 棉签有条痕的部分必须全部覆盖粪便。

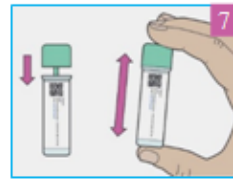

7 盖好瓶盖后用力摇晃试管。



8 检查标签上的信息是否已经填好、标签是否正确贴于试管表面。
将试管放入保护袋中。

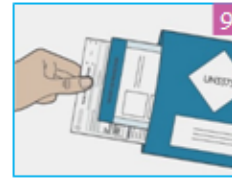

9 将下列内容装入 T 信封中：
● 装有试管的保护袋；
● 已经填写完备的身份识别卡。

将信封关闭封好。



10 做完测试后必须在 24 小时内将信封寄出。

测试结果会在 15 日之内通过信件寄回。如果希望上网查询结果，请登录 www.resultat-depistage.fr 网址进行注册。

可通过如下多种渠道获取更多信息：

- 咨询您的医生
- 登录 e-cancer.fr 网站阅读« Dépistage » (疾病筛查) 栏的相关信息
- 拨打 0 805 123 124 (按本地通话费率收费)
周一至周五 8 : 30 至 18 : 00 ; 周六 9 : 00 至 14 : 00
- 向您所在省份负责疾病筛选工作的相关机构咨询

常见问题：

- 测试的有效使用期是多长时间？
试管表面明确标有失效日期。
- 我的试管不见了/损坏了，该怎么办？
联系您的医生，重新进行测试。
- 未能按照要求正确进行采集，该怎么办？
联系您的医生，或者向您所在省份负责疾病筛选工作的相关机构咨询。他们会提供建议，让您重新进行测试。

